シアナジン (CAS no. 21725-46-2)

試験管内試験結果

1. 試験項目

シアナジンについて、下表に示す試験項目(作用)を対象として、第1段階試験管内試験(レポータージーン試験)を実施した。

試験対象とした作用モード										
エストロゲン	抗エストロゲン	アンドロゲン	抗アンドロゲン	甲状腺ホルモン	抗甲状腺ホルモン	脱皮ホルモン	その他*			
_	Р	_	_	_	_	_	_			

P: EC₅₀ 又は IC₅₀ 値が検出 O: 試験対象としたが、まだ実施していない作用モード


N: EC_{50} 又は IC_{50} 値が検出不可 -: 試験対象としなかった作用モード

':その他


2. 試験方法


レポータージーン試験は、OECD の TG455 (Stably Transfected Human Estrogen Receptor-α Transcriptional Activation Assay for Detection of Estrogen Agonist-Activity of Chemicals)及び Draft TG (Stably Transfected Human Androgen Receptor-α Transcriptional Activation Assay for Detection of Androgenic Agonist Agonist/Antagonist Activity of Chemicals)も参考に、化学物質の内分泌かく乱作用に関する日英共同研究において開発した方法及び条件に準じて実施した。


アゴニスト検出系の試験での EC50 値及び PC10 値の算出

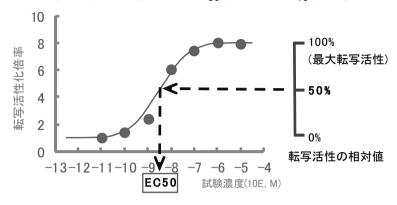

アンタゴニスト検出系の試験での IC50 値及び linIC30 値の算出

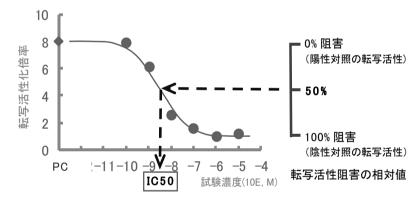

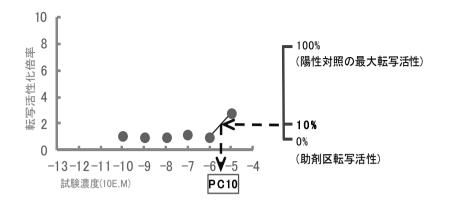


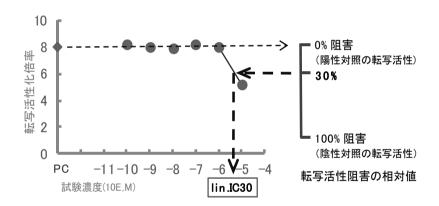


(1) メダカエストロゲン受容体 α (ER α) レポータージーン試験(抗エストロゲン作用)

抗エストロゲン作用については、転写活性化倍率に濃度依存的な低下がみられた。その IC_{50} 値は、 6.1×10^{-7} M、相対活性比は 4-ヒドロキシタモキシフェン(OHT)の 0.053%であった。

medaka ERα

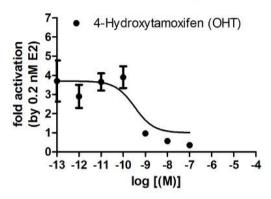

medaka ERα

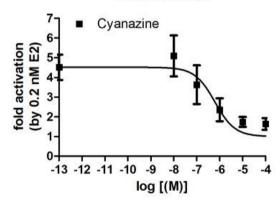

試験対象物質	抗エストロゲン作用			
武峽对象物員	IC ₅₀ 値(M)	相対活性比		
シアナジン	6.1 × 10 ⁻⁷	0.053%		
4-ヒドロキシタモキシフェン	3.3×10^{-10}	100%		

	メダカエストロゲン受容体 <i>α</i> レポータージーン試験		メダカアンドロゲン受容体 β レポータージーン試験		ニシツメガエル 甲状腺ホルモン受容体 β レポータージーン試験		
	エストロゲン作用	抗エストロゲン作 用	アンドロゲン作用	抗アンドロゲン作 用	抗甲状腺ホルモン作用		
細胞株	HEK293		HepG2		HEK293		
受容体発現ベクター	medaka ER alpha/pcDNA		medaka AR beta/pcDNA		tropicalis TR beta/pcDNA		
試験レポーターベクター	ERE-TK- <i>Luc</i>		MMTV- <i>Luc</i>		TRE-minP- <i>Luc</i>		
コントロールレポーター ベクター	pRL-TK- <i>Rluc</i>						
試験用培地	DMEM(2mM L-glutamine、10% FCS 含有)						
試験環境	37℃、5%CO₂						
細胞播種数	5×10 ⁴ 細胞/well						
連数	3well/濃度						
試験液量	1 mL/well						
溶媒	ジメチルスルホキシド (DMSO)						
溶媒終濃度	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%		
被験物質添加濃度(試験 濃度)	最高濃度:10 ^{-4~} 10 ⁻⁵ M、最低濃度:10 ^{-8~} 10 ⁻⁹ M(公比10)						
陽性物質及び共添加濃度	-	E2, 2×10^{-10} M		11KT、 1×10^{-8} M	T3、2×10-8M		
溶媒終濃度	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%		

(EXTEND2010 に基づく平成 23 年度第2回化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会 資料 3-2 より抜粋)