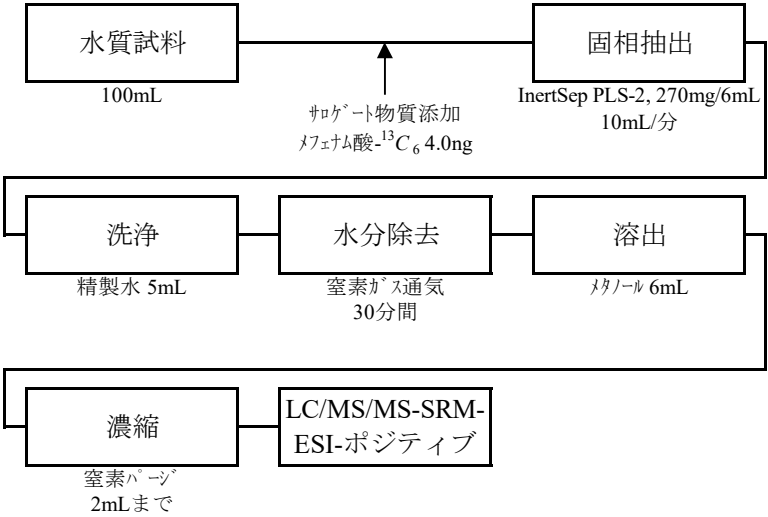


調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[5] <i>N</i>-(2,3-ジメチルフェニル)アントラニル酸 (別名：メフェナム酸)	【水質】  「令和2年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：LC/MS/MS-SRM-ESI-ポジティブ 検出下限値： 【水質】 (ng/L) [5] 0.16 分析条件： 機器 LC：Shimadzu Nexera XR MS：AB Sciex QTRAP 5500 又は LC：Waters ACQUITY UPLC MS：Waters Xevo TQ MS 他 カラム L-column2 ODS 100mm×2.1mm、2μm にリテンションギャップカラム L-column2 ODS 50mm×2.1mm、2μm を接続 又は ACQUITY UPLC BEH C18 100mm×2.1mm、1.7μm 他